



Za upotrebu samo prilikom primene ovih proizvoda. Pre upotrebe proverite da li rukavice imaju eventualne nedostatke ili greške. Pazite da rukavice u potpunosti pokrivaju obe ruke i izbegavajte kontakt sa proizvodom. Rukavice samo za jednokratnu upotrebu.

Priručnik sa uputstvom za upotrebu

Opis rukavica: Polietilenske rukavice (PE)

Referenca proizvoda: SD-PE -001

Veličina: 13

Veličina ruke	13
Obim ruke (mm)	340±5
Dužina ruke (mm)	290±5

Predviđena upotreba: Da obezbede zaštitu ruku prilikom primene ovih proizvoda.

Testiranje i učinak:

Kategorija III LZO u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi u odnosu na neškodljivost, udobnost, čvrstoću i evropske usaglašene standarde EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Tip C



EN ISO374-1:2016/A1:2018/Tip C, Nivo učinka 6: Izmereno vreme proboja > 480 min

Testirana hemikalija	CAS br.	Slovo	Nivoi učinka za propusnost	Vrednost degradacije
Natrijum hidroksid 40%	1310-73-2	K	6/6	5,3%
Formaldehid 37%	50-00-0	T	6/6	11,2%

Tip C: Učinak za propusnost je najmanje nivo 1 u odnosu na najmanje jednu testiranu hemikaliju.

Zaptivenost i vodonepropusnost: saobrazna

AQL nivo uzorkovanja: <1,5

Rukavica ispunjava zahteve standarda EN ISO 21420:2020.

Opšti zahtevi za spretnost u radu sa rukavicom: 5/5

Uputstvo za upotrebu:

1. Otvorite paket.
2. Nosite direktno.
3. Pazite da rukavice u potpunosti pokrivaju obe ruke i što je više moguće izbegavajte kontakt sa proizvodom.

Upozorenja:

1. Rukavice su pogodne za zaštitu ruku.
2. Pre upotrebe proverite da li rukavice imaju eventualne nedostatke ili greške.
3. Nemojte da koristite pakovanje rukavica nakon datuma isteka važnosti (vidite rok upotrebe u nastavku).
4. Nemojte da koristite ako je paket kontaminiran.
5. Samo za jednokratnu upotrebu. Odložite nakon upotrebe.
6. Otpornost na hemikalije je procenjena u laboratorijskim uslovima iz uzoraka uzetih samo sa dlana i odnosi se samo na testirane hemikalije. Može se razlikovati ako se hemikalija koristi u smesi.


7. Ove informacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mestu i diferencijaciju između smesa i čistih hemikalija.
8. Prilikom upotrebe, zaštitne rukavice mogu da pruže manji otpor na proizvod zbog promena u fizičkim svojstvima. Kretanje, hvatanje, trljanje, degradacija uzrokovani kontaktom sa hemikalijom i sl. mogu znatno da smanje stvarno vreme korišćenja. Za korozivne hemikalije, degradacija može da bude najznačajniji faktor koji treba imati u vidu prilikom izbora rukavica otpornih na hemikalije.
9. Ovaj model ne sadrži supstance na nivoima o kojima se zna ili postoje sumnje da negativno utiču na higijenu ili zdravlje korisnika.
10. Zaštita od rizika ili opasnosti koji nisu pomenuti u ovom dokumentu nije garantovana. Pomenuti nivoi učinka su važeći samo za dlan rukavice. Pomenuti nivoi učinka su važeći samo za nove, a ne i za prane ili regenerisane rukavice. Ovi nivoi učinka se dobijaju iz testova koji se vrše u skladu sa uslovima definisanim primenjivim standardima.
11. Higijena ruku: kako biste sprečili kontaminaciju ruku zaprljanom rukavicom, rukavicu obavezno skinite tako što ćete je uhvatiti u osnovi zgloba i povući prema prstima. Skliznite prste unutar druge rukavice i izvadite rukavicu. Izbegavajte da dodirujete kožu.
12. Preporučuje sa da proverite da li rukavice odgovaraju predviđenoj upotrebi zbog toga što se uslovi na radnom mestu mogu razlikovati od tipa testa u zavisnosti od temperature, abrazije i degradacije.

Skladištenje:

Paket sa rukavicama treba skladištiti u čistoj, suvoj prostoriji na normalnoj temperaturi prostorije.

Rok trajanja: Paket sa rukavicama važi pet godina od datuma proizvodnje.

Piktogram:

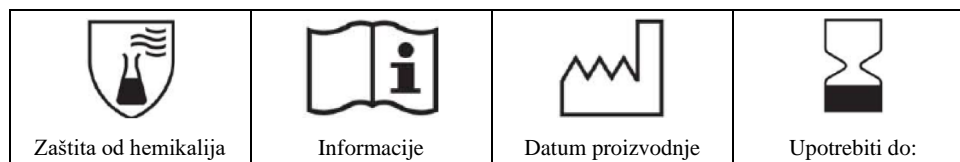

Informacije o proizvođaču:

Kompanija: Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.

Adresa: No. 608, Xingwen Rd., Jiading, Šangaj, Kina

Tel.: 86-21-33517332

Informacije o ovlašćenom telu:

Proces EU sertifikacije modula B i modula C2 sproveo je **CTC**

4, rue Hermann. Frenkel – 69367 Lion Cedex 07

Država: Francuska

Telefon: +33/4.72.76.10.10

Imejl: cemarking@ctcgroupe.com

Internet-stranica: <http://www.ctcgroupe.com/>

Broj ovlašćenog tela: 0075

EU Deklaracija o usaglašenosti:

EU Deklaracija o usaglašenosti je dostupna preko ove veze:

<http://www.sh-shengda.com/instructions/>

CE 0075